

ZC-S500

ISO13485 YY/T 0287 National High Tenchnique Enterprise

JOINCHAMP



FOSHAN JOINCHAMP MEDICAL DEVICE CO.,LTD.
INVERSIONES PROMATDEN SAC
VENTAS@PROMATDEN.COM
TELF 996293322

 Pictures are for reference only, the actual product serves as the standard.



Lowest chair position



Highest chair position



Carrying capacity of dental chair



LA TECNOLOGÍA PROTEGE LA SALUD BUCAL
ABRA UNA NUEVA ERA DE UNIDAD DENTAL INTELIGENTE





SISTEMA DE BLOQUEO



TAPIZADO SIN COSTURAS



TAPIZ SUAVE



CUERO IMPORTADO



APOYA BRAZO ABATIBLE



La mesa de control suspendida reduce eficazmente la presión sobre los pacientes causada por el brazo horizontal, lo que hace que el paciente se sienta más cómodo, mientras que el dentista tiene más espacio de operación.

DISEÑO ERGONÓMICO, EXPERIENCIA AGRADABLE Y CÓMODA

- Los apoyabrazos dobles de aluminio fundido a presión son fuertes, no son fáciles de deformar y con Alta estabilidad oxidativa.
- El apoyabrazo derecho solo necesita ser girado hacia adelante por el dentista y se caerá automáticamente.



CONTROL TÁCTIL PARA UN FÁCIL CONTROL

Superficie de vidrio resistente a la corrosión y fácil de limpiar



45°
outward adjustment
of handpiece holder

30°
inward adjustment
of handpiece holder

SISTEMA DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA DE UNA SOLA TECLA

Jeringa Triple/ Piezas de mano / Succiones (alta y baja)

Como usarlo:

1. Coloque la jeringa triple, las piezas de mano y las mangueras de la succión en el Estante de plástico para desinfectante.
2. Colocar 300ml de liquido desinfectante en la botella (Color car una buena cantidad de desinfectante como sea necesario.
3. Presione la tecla de desinfección en la mesa de control para activar el sistema, la luz indicadora se encendera, suena un pitido largo, la desinfección está en proceso. Cuando vuelve a sonar un pitido largo, la luz indicadora se apagara, significa que la desinfección ha finalizado.
4. Vuelva a colocar la jeringa triple, las mangueras y ambas succiones cuando la desinfeccion termino.



- El cuerpo de control y el mango están hechos de aluminio fundido integrado.
- Los iconos son claros y fáciles de entender con una respuesta rápida.
- El soporte de la pieza de mano se puede ajustar 45° hacia afuera y 30° hacia adentro.
- Toda la mesa se puede girar y extender hacia adentro y hacia afuera.
- La bandeja de acero inoxidable se puede girar 180° hacia afuera.
- La bandeja de acero inoxidable es fuerte, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.



Patent number of the doctor table:
202430070005.6

Disinfection rate up to 99.99% in 30 seconds
Comply with the requirements of GB/T 5750.12-2006
Total colony count ≤ 100 CFU/mL

MOVIMIENTO DE ARRANQUE SUAVE Y SINCRONIZADO

Sin fricción en el movimiento

· El riel deslizante de aluminio y el soporte del respaldo adoptan el proceso de moldeo integrado. · Confiable y duradero, alta precisión, sin óxido. · Calidad y estabilidad garantizadas. · La estructura de movimiento del riel deslizante brinda una experiencia más suave y estable.

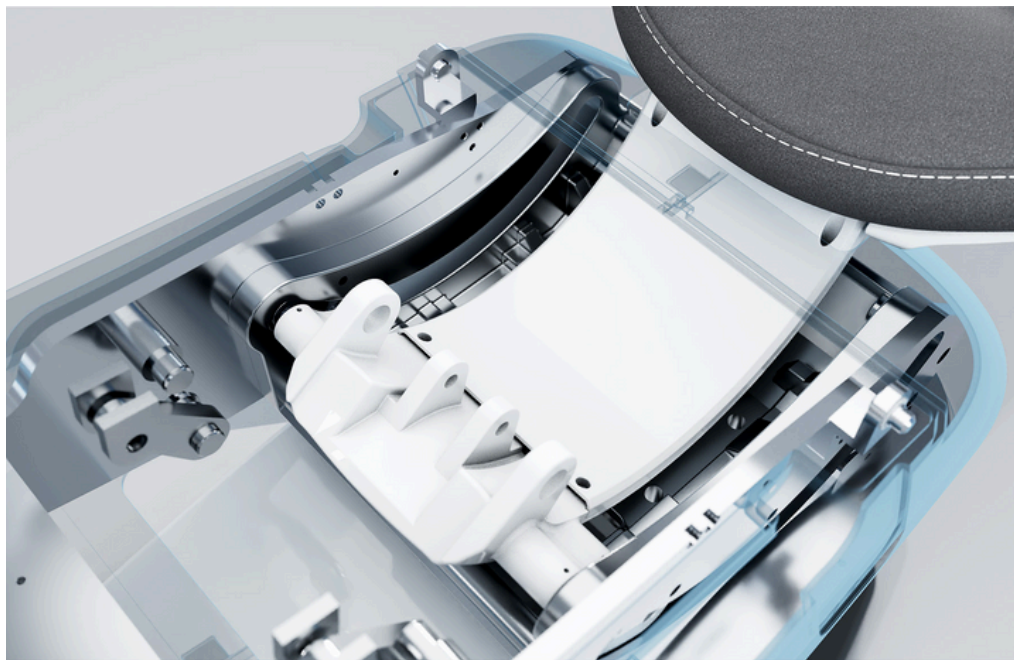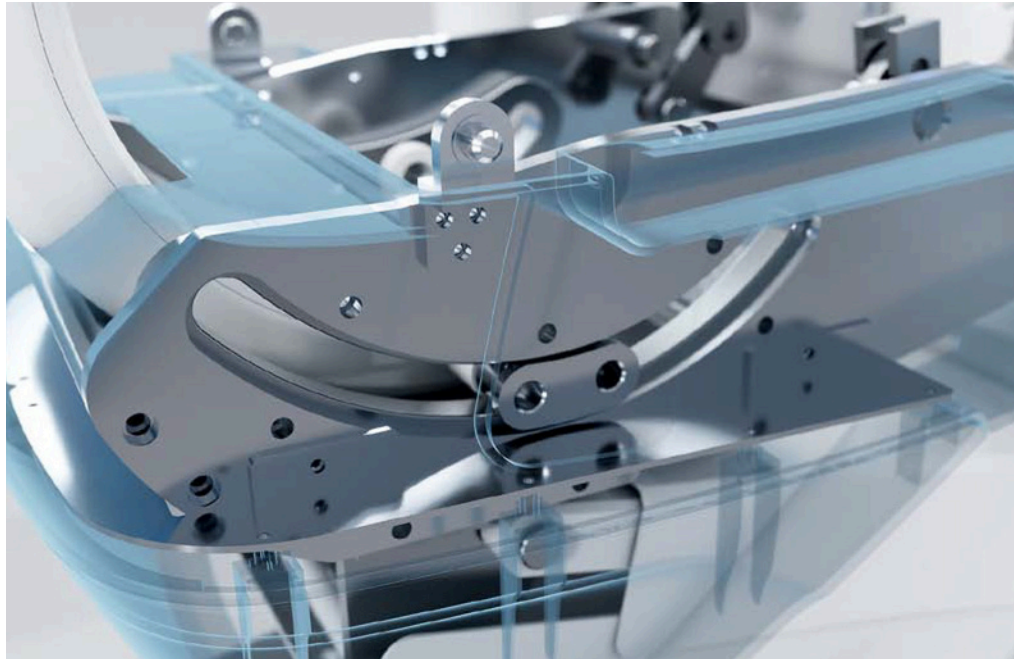

AJUSTE DE ÁNGULO MULTINIVEL

Manejo flexible, cómodo y práctico



FUNCIONES PRÁCTICAS PANTALLA DETALLADA



Luz ambiental colorida para la escupidera



Cargador inalambrico



Pantalla que indica la temperatura del agua





Boton para añadir agua para el vaso del paciente



Escupidera giratoria desmontable



Espejo para el paciente

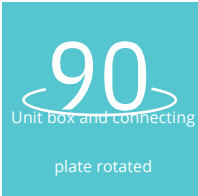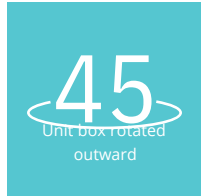

JOINCHAMP "XIAO MANYAO" CAJA DE LA UNIDAD PATENTADA

Integra múltiples funciones fáciles y prácticas
Número de patente de la caja unitaria:



ILUMINACION CLARA

Luz LED de 10 focos de 3 modos con sensor
· Con fuentes de luz amarillas y blancas ·
Antienvejecimiento y antifracturas · Mango
extraíble de aluminio fundido

Sensor de infrarrojos, ajuste continuo ·
Botones táctiles · Distancia vertical del
brazo de luz
es de 700 mm

AJUSTE DE ILUMINACION

5200 - 70000 Lux

CAJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR

4000 - 5700K

 PHILIPS LAMP BEADS





300°

Corner of light arm

270°

Corner of LED light

DELICADO Y COMPACTO

Ajuste de ángulo de varios niveles, conveniente y práctico



10S

Both suctions delayed

Control de asistente sin sticker

· Puede ajustar el ángulo en varios niveles. · El primer nivel se puede ajustar 90° hacia afuera, el segundo nivel se puede ajustar 90° hacia afuera y 45° hacia adentro. · Adopta un diseño táctil sin sticker, el panel se puede ajustar a 45 ° a la izquierda y a la derecha. Ambas manijas de succión son desmontables.

TAPIZ DE CUERO CONTINENTAL



F049

F079

F172

F205

F354

F496


F542

F581

F707

F715

10 CARACTERISTICAS DEL CUERO CONTINENTAL

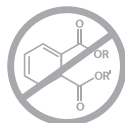

phthalate-free



long-lasting



tear resistant



easy to clean



abrasion resistant



blood and urine resistant



lightfast



disinfectant resistant



fulfills medical standard



vegan

Configuration



Standard configurations	Electric dental chair	Sliding rail dental chair with leather cushion
	Touch control system	3 groups of 9 memory positions
	Cold/warm 3-way syringe	1 set
	Disinfection system	1 set
	Purified water bottle/ Disinfectant bottle	1 piece each
	Strong suction and saliva ejector	1 set each
	Assistant control	1 set
	DC motor	2pcs
	Built-out X-film viewer	1 set
	Ceramic spittoon	1 set (rotary and detachable)
	Operation light	Triaxial LED-J light 1 set
	Operator stool	1 set
Optional accessories	Floor type unit box	Electric micromotor
	Curing light	Water sterilizer
	Intraoral camera system	Scaler
	Top mounted doctor table	Trolley-type doctor table
	High speed air turbine handpiece	Low speed air motor handpiece
	Stop function in case of obstacle	Central vacuum device
Technical parameters	Power supply	220V, 50Hz
	Air pressure	0.5MPa-0.8MPa
	Water pressure	0.2MPa-0.4MPa